

Annie - Kompressionsbyxa

ART.NO 51202

Vadlång kompressionsbyxa i stickat sömlöst material. Byxa i dragpå modell, stängd gren. Rekommenderas efter mindre kirurgi eller fettsugning på ben och/eller buk. Kan också användas som en "steg-2-produkt" en tid efter operation. Linning med silikonkant för att byxan bekvämt ska sitta på plats. Bred kil på insida lår för bästa komfort och funktion. Formstickat, flexibelt material i 4-vägs stretch som formar sig efter kroppen. Avlastar och komprimerar utan att skära in eller kännas obekvämt. Formstickade zoner i knä-, stuss- och ljumskparti samt förstärkt stickning över buk.

Indikationer: Kompressionsplagg efter plastikkirurgi. Motsvarande kompressionsklass 1.

Kontraindikationer: Infektion. Arteriella cirkulationsstörningar. Hög risk för trombos.

Material: 87% Polyamid, 13% Elastan. Latexfri.

Tvättråd: Maskintvätt 40°C, kan vid behov tvättas i högre temperaturer, max 60°C. Produkten håller längre vid tvätt i lägre temperaturer. Använd gärna tvättpåse. Använd ej blekmedel, klorin eller mjukmedel. Ej torktumlas.

Måttagning: För bästa passform och korrekt kompressionsgrad är det viktigt att plagget provas ut noggrant enligt måttabell. Plagget skall sitta tight men får inte kännas obekvämt eller strama.

Midja: Mät omkretsen där midjan är som smalast.


Höft: Stå med båda fötterna ihop och mät omkretsen över pubis, där höft/stuss är som bredast.

Lår: Omkretsmått mitt på låret.

Storlek	Midjemått cm	Höftmått cm	Lårmått cm	Art.no Svart	Art.no Beige
XS	62-68	86-91	46-50	51202-00-30	51202-08-30
S	69-75	92-97	50-54	51202-00-40	51202-08-40
M	76-83	98-103	54-58	51202-00-50	51202-08-50
L	84-92	104-111	58-62	51202-00-60	51202-08-60
XL	93-101	112-119	62-66	51202-00-70	51202-08-70
2XL	102-110	120-127	66-70	51202-00-80	51202-08-80



Silikon i linningen.

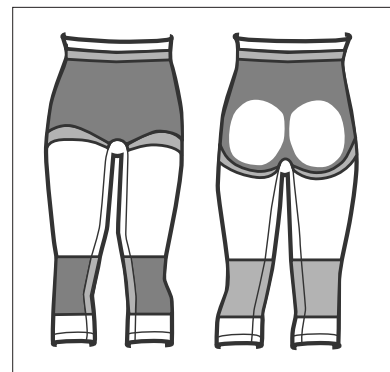

Compression class I



Seamless



4-way stretch



STANDARD 100

6234-7001 DTI

www.oeko-tex.com

