

Peggy - Knälång kompressionsbyxa

ART.NO 51206

Knälång kompressionsbyxa i stickat sömlöst material. Rekommenderas efter ingrepp på stuss, höfter och/eller lår, så som fettugning och/eller kirurgi. Plagget kan också användas som en "steg-2-produkt" efter ett större ingrepp då kompression rekommenderas en längre tid efter operation. Byxan är framknäppt med hysk- och hakknäppning för enkel av- och påtagning samt justering av passform. Linning med silikonkant för att byxan bekvämt ska sitta på plats. Bred kil på insida lår för bästa komfort och funktion. Byxan har en dold öppning i grenkilen som möjliggör toalettbesök utan att plagget tas av. Öppningen är designad för att ge god kompression i området. Formstickat, flexibelt material i 4-vägs stretch som formar sig efter kroppen. Avlastar och komprimerar utan att skära in eller kännas obekvämt. Formstickade zoner i stuss- och ljumskparti samt förstärkt stickning över buk.

Indikationer: Kompressionsplagg efter kirurgi. Motsvarande kompressionsklass 1.

Kontraindikationer: Infektion. Arteriella cirkulationsstörningar. Hög risk för trombos.

Material: 87% Polyamid, 13% Elastan. Latexfri.


Tvättråd: Maskintvätt 40°C, kan vid behov tvättas i högre temperaturer, max 60°C. Produkten håller längre vid tvätt i lägre temperaturer. Använd gärna tvättpåse. Använd ej blekmedel, klorin eller mjukmedel. Ej torktumlas.

Måttagning: För bästa passform och korrekt kompressionsgrad är det viktigt att plagget provas ut noggrant enligt måttabell. Plagget skall sitta tight men får inte kännas obekvämt eller strama.



Midja: Mät omkretsen där midjan är som smalast.

Höft: Stå med båda fötterna ihop och mät omkretsen över pubis, där höft/stuss är som bredast.

Lår: Omkretsmått mitt på låret.

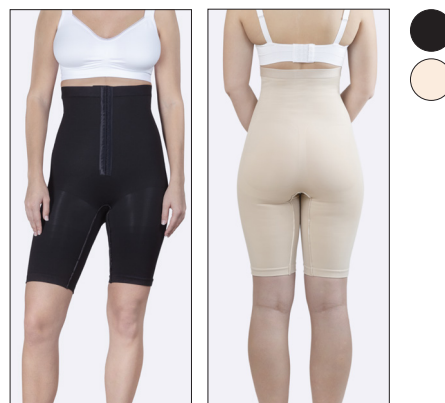

Silikon i linningen.

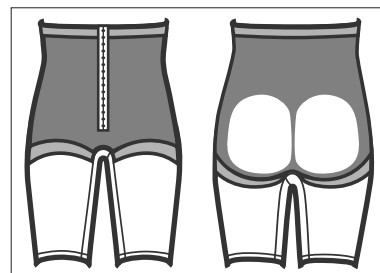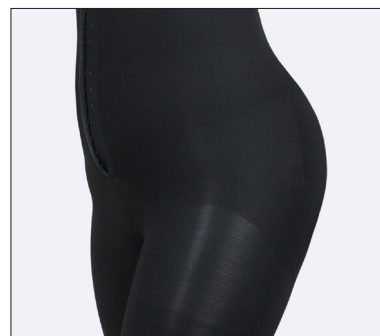

| Storlek | Midjemått cm | Höftmått cm | Lårmått cm | Art.no Svart | Art.no Beige |
|---------|--------------|-------------|------------|--------------|--------------|
| XS | 62-68 | 86-91 | 46-50 | 51206-00-30 | 51206-08-30 |
| S | 69-75 | 92-97 | 50-54 | 51206-00-40 | 51206-08-40 |
| M | 76-83 | 98-103 | 54-58 | 51206-00-50 | 51206-08-50 |
| L | 84-92 | 104-111 | 58-62 | 51206-00-60 | 51206-08-60 |
| XL | 93-101 | 112-119 | 62-66 | 51206-00-70 | 51206-08-70 |
| 2XL | 102-110 | 120-127 | 66-70 | 51206-00-80 | 51206-08-80 |

