

Dolly - Kompressionsbody

ART.NO 51207

Kompressionsbody med hög rygg i stickat sömlöst material. Rekommenderas efter ingrepp på stuss, höfter, buk och rygg såsom fettsugning och/eller kirurgi. Bodyn har hysk- och hakknäppning mitt fram för enkel av- och påtagning och justering av passform. Bred kil på insida lår för bästa komfort och funktion. Bodyn har dold öppning i grenkilen som möjliggör toalettbesök utan att plagget tas av. Öppningen är designad för att ge god kompression i området. Brett skuren i ryggen och justerbara axelband för god kompression över rygg och längs sidorna. Formstickat, flexibelt material i 4-vägs stretch som formar sig efter kroppen. Avlastar och komprimerar utan att skära in eller kännas obekvämt. Formstickade zoner i stuss-, skulder- och ljumskparti samt förstärkt stickning över buk.

Indikationer: Kompressionsplagg efter plastikkirurgi.

Motsvarande kompressionsklass I.

Kontraindikationer: Infektion. Arteriella cirkulationsstörningar.

Hög risk för trombos.

Material: 87% Polyamid, 13% Elastan. Latexfri.

Tvättråd: Maskintvätt 40°C, kan vid behov tvättas i högre temperaturer, max 60°C. Produkten håller längre vid tvätt i lägre temperaturer. Använd gärna tvättpåse. Använd ej blekmedel, klorin eller mjukmedel. Ej torktumlas.

Måttagning: För bästa passform och korrekt kompressionsgrad är det viktigt att plagget provas ut noggrant enligt måttabell. Plagget skall sitta tight men får inte kännas obekvämt eller strama.

Midja: Mät omkretsen där midjan är som smalast.

Höft: Stå med båda fötterna ihop och mät omkretsen över pubis, där höft/stuss är som bredast.

Lår: Omkretsmått mitt på låret.


Storlek	Midjemått cm	Höftmått cm	Lårmått cm	Art.no Svart	Art.no Beige
XS	62-68	86-91	46-50	51207-00-30	51207-08-30
S	69-75	92-97	50-54	51207-00-40	51207-08-40
M	76-83	98-103	54-58	51207-00-50	51207-08-50
L	84-92	104-111	58-62	51207-00-60	51207-08-60
XL	93-101	112-119	62-66	51207-00-70	51207-08-70
2XL	102-110	120-127	66-70	51207-00-80	51207-08-80



Hysk- och haköppning mitt fram samt brett skuren i ryggen.



Axelbanden kan fästas mitt fram eller i sidorna.

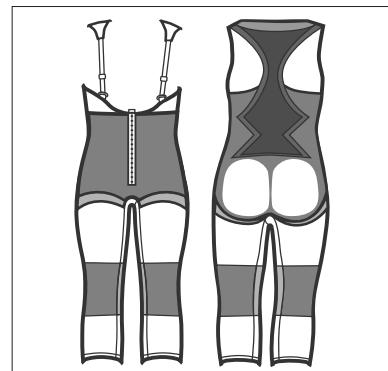

Adjustable with hook & eye



Seamless



4-way stretch



Compression class I



STANDARD 100

6234-7001 DTI

www.oeko-tex.com



Class I

