

# Cindy - Kompressionsbody

ART.NO 51208

Kompressionsbody med extra hög midja i stickat sömlöst material. Rekommenderas efter ingrepp på buk, sidor, rygg, stuss och lår såsom fettsugning och/eller kirurgi. Bodyn har hysk- och hakknäppning i båda sidor för enkel av- och påtagning och justering av passform. Bred kil på insida lår för bästa komfort och funktion. Bodyn har dold öppning i grenkilen som möjliggör toalettbesök utan att plagget tas av. Öppningen är designad för att ge god kompression i området. Avtagbara och justerbara axelband. Formstickat, flexibelt material i 4-vägs stretch som formar sig efter kroppen. Avlastar och komprimerar utan att skära in eller kännas obekvämt. Formstickade zoner i stuss-, rygg- och ljumskparti samt förstärkt stickning över buk.

**Indikationer:** Rekommenderas efter plastikkirurgi. Kompression förbättrar cirkulationen och minskar risken för svullnad efter operation, vilket förbättrar läkningsprocessen och bidrar till smärtlindring. Motsvarande kompressionsklass 1.  
**Kontraindikationer:** Infektion. Arteriella cirkulationsstörningar. Hög risk för trombos.

**Material:** 87% Polyamid, 13% Elastan. Latexfri.

**Tvättråd:** Maskintvätt 40°C, kan vid behov tvättas i högre temperaturer, max 60°C. Produkten håller längre vid tvätt i lägre temperaturer. Använd tvättpåse. Använd ej blekmedel, klorin eller mjukmedel. Ej torktumlas.

**Måttagning:** För bästa passform och korrekt kompressionsgrad är det viktigt att plagget provas ut noggrant enligt måttabell. Plagget skall sitta tight men får inte kännas obekvämt eller strama.

**Midja:** Mät omkretsen där midjan är som smalast.


**Höft:** Stå med båda fötterna ihop och mät omkretsen över pubis, där höft/stuss är som bredast.

**Lår:** Omkretsmått mitt på låret.


Storlek	Midjemått cm	Höftmått cm	Lårmått cm	Art.no Beige	Art.no Svart
XS	62-68	86-91	46-50	51208-08-30	51208-00-30
S	69-75	92-97	50-54	51208-08-40	51208-00-40
M	76-83	98-103	54-58	51208-08-50	51208-00-50
L	84-92	104-111	58-62	51208-08-60	51208-00-60
XL	93-101	112-119	62-66	51208-08-70	51208-00-70
2XL	102-110	120-127	66-70	51208-08-80	51208-00-80



Hysk- och haköppning i båda sidorna samt avtagbara axelband.

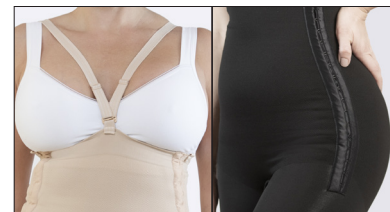

Axelbanden kan fästas mitt fram eller i sidorna.

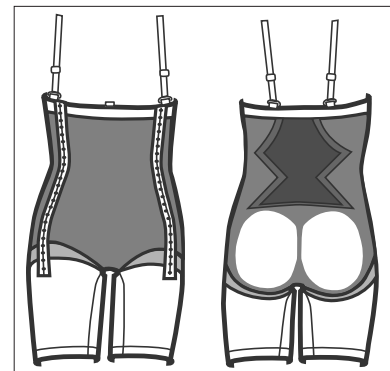

Adjustable with hook & eye



Seamless



4-way stretch



Compression class I



STANDARD 100  
6234-7001  
DTI  
www.oeko-tex.com

