

Shoulder ABDuction Pillow 15° - Abduktionsortos

ART.NO 20130

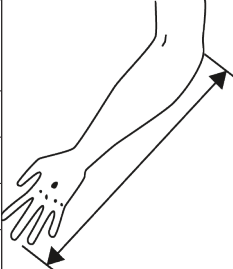
Abduktionsortos med kudde som håller armen/ skuldran immobiliserad i 15° abduktion. Det avlastande 3-punkt systemet är lätt att applicera och trycker ej i nacken. Bandens längd kan enkelt justeras genom att klippa dem och flytta krokodilgapen. Den mjuka armpåsen kan öppnas snabbt för armmobilisering eller personlig hygien utan att behöva ta bort band eller kudde. Passar både vänster och höger arm. En extra hygienrem till armhålan medföljer i varje kit.

Indikationer: Ger stöd och immobilisering efter rotatorcuff-operation, operation i ledkapsel, Bankart-operation, allmän axelinstabilitet.

Kontraindikationer: Inga kända.

Material: Polyester, Nylon, PU Foam. Latexfri.

Tvättråd: Maskintvätt 40°C. Fäst kardborrbandet. Använd tvättpåse. Använd ej blekmedel, klorin eller sköljmedel. Ej kemtvätt. Stryk och torktumla ej.

Storlek	Längd underarm cm	Art.nr.	
S	34-38	20130-00-40	
M	37-43	20130-00-50	
L	42-48	20130-00-60	
XL	48+	20130-00-70	

