

CubitiComfort - Frakturortos

ART.NO 20222

Cubiti Comfort är en stabil helarmsortos att användas vid rehabilitering och/eller frakturbehandling. Ortosen är bekväm och trygg, lindrar smärta och medger rörlighet i axel och armbågsled vilket minskar risken för ledstelhet och muskelatrofi under behandlingstiden. Ställbar rörlighet flexion/extension i armbågsleden med 15° intervall. Går att låsa i önskat läge. Kan enkelt individanpassas. Ortosen har breda band som tillsammans med formgjutna plattor ger jämn kompression och god avlastning. De integrerade formgjutna plattorna kan formas om och ortosens längd kan justeras steglöst. Passar både höger och vänster arm.



Reg. design by OHIM: 001951500-0001

Indikationer: Frakturer i armbåge, humerus, radius eller ulna. Ligamentrupturer. Postoperativt. Senor och ligamentsskador. Kollateralligament rekonstruktioner. Kontraktur behandling.


Material: Ventilerande textilt distansmaterial som är svårt mot huden och tillåter huden att andas. Polyester 59%, Polyamid 37%, Bomull 2%, Elastan 1%, Polyuretan 1%. Latexfri. Led i aluminium.

Tvättråd: Den textila ortosen maskintvättas 40°. Tag ur leden. Fäst karborrbanden. Använd tvättpåse. Använd ej blekmedel, ej kemtvätt. Stryk och torktumla ej. Leden torkas av med mjuk fuktig trasa alternativt spritas av.

Måttagning: Omkretsmått runt överarmen och underarmen proximalt. Den totala längden på ortosen kan justeras steglöst.

Extra lattor, artikelnummer 20221:

Beställs separat. 4 st/förpackning, Stl S – XL.
För ökad stabilitet och kompression vid större armomfång.
1 alt 2 lattor sätts in i resp sidoficka.

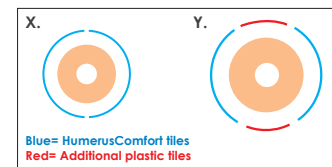

Storlek	A. Omkrets överarm cm	B. Omkrets underarm cm	C. Ortosens längd överarm cm	D. Ortosens längd underarm cm	E. Ortosens totala längd cm	Art.no
Small	17-23	18-26	26,5	17	46-54	20222-09-40
Medium	23-32	23-32	28,5	19	50-58	20222-09-50
Large	30-39	28-38	30,5	20	52-60	20222-09-60
X Large	38-50	28-38	30,5	20	52-60	20222-09-70