

AtleMage - Ryggortos

ART.NO 50105

AtleMage är en semielastisk ryggortos som ger ett stabilt stöd över ländryggen samtidigt som den lyfter/stödjer buken. Lämplig att använda till personer med större/förläslappat abdominalt parti samt till gravida/efter graviditet. Ryggpartiet är tillverkat i AirX material, ett elastiskt material med god kompression som är mycket behagligt att bära då det andas. Frontpartiet är oelastiskt och ger stabilt stöd/lyft för buken. "Formen" på frontpartiet kan justeras i båda sidor med kardborrlåsning så optimalt lyft/storlek uppnås. Ortosen passar därför även till gravida då den kan justeras allt eftersom magen växer. Elastiska dragband fästes fram/under magen med kardborre, justerbara för att uppnå önskat stöd i ländryggen. Två urtagbara ryggskenor formas individuellt efter ryggens kontur. Färg beige.


Indikationer: Används vid ryggskott, ischias samt övriga vanligt förekommande besvär i ländryggen. För att ge extra stöd för en större/förläslappad buk, vid graviditet eller för personer som har mindre bråck.

Material: Polyamid 46%, Polyester 44%, Elastan 5%, Bomull 4%, Naturgummilatex 2%.

Tvättråd: Maskintvätt 40°C. Fäst kardborrbanden. Använd tvättpåse. Plantorkas. Använd ej blekmedel, ej kemtvätt. Stryk och torktumla ej.

Måttagning: Höftmått i cm.

Storlek	Höftmått cm	Art.no	Höjd mitt fram	Höjd mitt bak
S	80-95	50105-08-40	25 cm	26,5 cm
M	95-105	50105-08-50		
L	105-115	50105-08-60		
XL	115-125	50105-08-70		
2XL	125-135	50105-08-80		

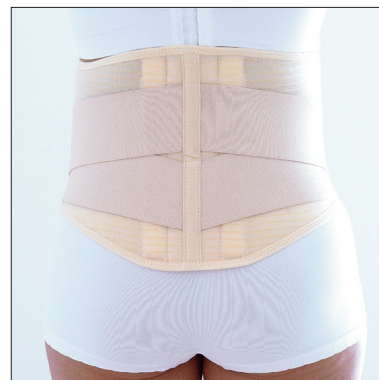

LATEX Trådomspunnen, kommer ej i kontakt med hud.

MD Class I **CE**