

BirkPlus MP45 - 3-punkt korsett

ART.NO 50371

3-punkt korsett som används för att begränsa/kontrollera flexion och sidorörlighet i den thoracolumbala delen av ryggraden.

Enkel att justera med hjälp av skruvmejsel:

- Den nedre bygeln går att ställas in i rörligt alternativt fixerat läge. Vid inställning i rörligt läge blir ortosen mer bekväm, speciellt vid sittande.
- Den övre bygeln går att justera i vidd. Den går även att ställas in i olika vinklar för att uppnå bästa passform över bröstkorgen vid olika grader lordos.
- Produkten är justerbar i höjd. Polstringen i sidan är delad och kan positioneras i önskat läge.

När ortosen väl är inprovad sköts av- och påtagning via ett spänne. Spännet är av säkerhetsskäl fjäderbelastat i sitt låsta läge. BirkPlus går att duscha med, polstringen drar ej åt sig vatten.


Indikationer: Fraktur, kotkompression, osteoporos, dislokation, artros.

Material: Anodiserad aluminium. Polstring i PE skum, syntetiskt läder i vit färg. Polyesterband. Latexfri.


Tvättråd: Torkas av med mjuk fuktig trasa.

Måttagning: Höftmått i cm.

Storlek	Mått cm	Höjd	Art.no
Small	60-75	30-37	50371-09-40
Medium short	75-90	34-42	50371-59-50
Medium	75-90	36-46	50371-09-50
Medium long	75-90	40-52	50371-69-50
Large short	90-105	36-46	50371-59-60
Large	90-105	40-52	50371-09-60
XLarge short	105-115	39-49	50371-59-70
XLarge	105-115	42-54	50371-09-70

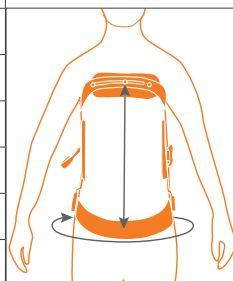

MD Class I CE

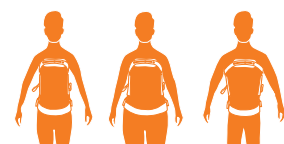

FITS ALL BODY TYPES