

LillaLUX - Patella ortos

ART.NO 70513

LillaLux är en patellastabiliserande ortos i omlottmodell för enkel på/avtagning. Dragriktning på patella justeras och kontrolleras med hjälp av två band. C-formad kudde i neoprene greppar mot huden och håller patella på plats. Anti-glid band på insidan av ortosen gör att den sitter säkert på plats.

Indikationer: Subluxation/luxation av patella samt patellofemorala smärttillstånd (PFSS).

Storlek: XS-2XL Universal höger/vänster.
XS-S: Barnstorlekar.


Material: Polyester 90%, Polyamid 4%, Nylon 3%, Styrenbutadiengummi (SBR) 2%, LDPE-skum 1%.

Tvättråd: Maskintvätt 40°C. Använd tvättpåse. Plantorkas. Fäst kardborrbanden innan tvätt och ta ut den C-formade kudden. Använd ej blekmedel, klorin eller sköljmedel då detta kan försämra materialets funktion. Ej kemtvätt. Stryk och torktumla ej.


Måttagning: Omkrets runt knä mitt över patella.

Storlek	Omkrets cm	Art.no
X-Small	25-28	70513-00-30
Small	28-36	70513-00-40
Medium	33-41	70513-00-50
Large	38-46	70513-00-60
X-Large	45-55	70513-00-70
2X-Large	53-61	70513-00-80

Child

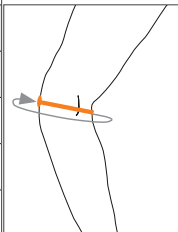

Fits both Adult & Child

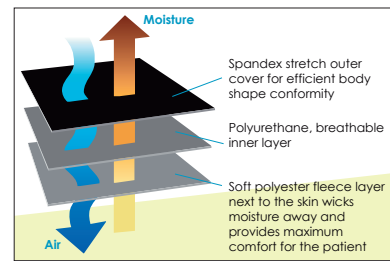

Lycra fleece - 3 lager laminerat material.

