

Knee-O-Trakker with hinge - Knäortos

ART.NO 70611

Knee-O-Trakker with hinge är en patellastabiliserande ortos med möjlighet att påverka dragriktning på patella. C-formad kudde i neopren som greppar mot huden och ger maximal kontroll av patella. Stabiliserande leder i lättmetall som är enkla att bocka för optimal passform. Höjd 33 cm. Ortosen placeras med kudden antingen medialt eller lateralt. Trycket/stödet på patella justeras och kontrolleras med hjälp av två band.

Indikationer: Subluxation/luxation av patella samt patellofemorala smärttillstånd (PFSS).


Storlek: XS-4XL Universal höger/vänster.
XS-S: Barnstorlekar.
2XL-4XL: King-size.

Material: Latexfri Neopren 70%, EVA foam 10%, Aluminium 5%, Elastik 15% (20% Elastan, 80% Nylon)

Tvåttråd: Handtvätt max 30°. Plantorkas. Fäst kardborrbanden och ta ur skenorna före tvätt. Använd ej blekmedel, klorin eller mjukmedel då detta kan försämra materialets funktion. Ej kemtvätt. Stryk och torktumla ej.

Måttagning: Omkrets runt knä mitt över patella.

	Storlek	Omkrets cm	Art.no
Child	XS	30,5-33	70611-00-30
	S	33-35,5	70611-00-40
	M	35,5-38	70611-00-50
	L	38-40,5	70611-00-60
	XL	40,5-46	70611-00-70
King-size	2XL	46-51	70611-00-80
	3XL	51-56	70611-00-90
	4XL	56-61	70611-00-91

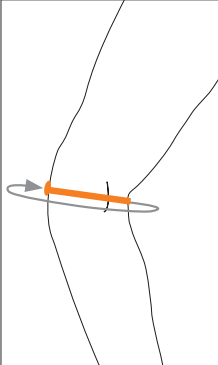


MD Class I CE



Fits both
Adult & Child