

# e-STAB 3-punkt korsett



Enkel att individanpassa

Övre bygeln är justerbar  
i både bredd och vinkel

Ram i lätt  
aluminiumlegering

Justerbar genom att  
endast lossa kruvarna

Nedre bygeln kan ställas  
i fixerat eller rörligt läge

  
**NordicCare**<sup>®</sup>

**NORDICARE ORTOPEDI + REHAB AB** • Solrosvägen 1 • SE-263 62 Viken, Sverige  
Tel: 042-35 22 20 • Fax: 042-35 22 21 • [info@nordicare.se](mailto:info@nordicare.se) • [www.nordicare.se](http://www.nordicare.se)

# e-STAB 3-punkt korsett

## Enkel att individanpassa

- Begränsar flexion och sidorörlighet i den thoracolumbala delen av ryggen (T10-L1/L2) och används vid fraktur, kotkompression, osteoporos eller artros.
- Anpassningsbar i vidd och höjd. En storlek passar många olika kroppsformer.
- Enkel justering eftersom skruvarna inte behöver tas bort, endast lossas.
- Teleskopisk och formbar höftbygel som är låsbar i olika vinklar.
- Vinkeln på bröstbygeln kan justeras stegvis 7,5 grader.




Höjd och bredd justeras enkelt med hjälp av skruvmejsel. Flyttbar och anatomisk rygglatta.




Bältets längd justeras enkelt med vändsölja och kardborrefäste för bandet.



Polstringen är avtagbar och vattenavvisande, vilket gör att den går att duscha med.

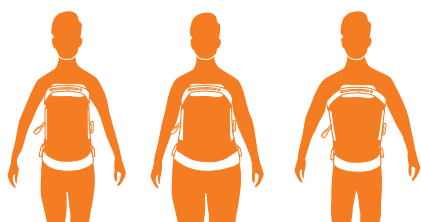

Fits all body types

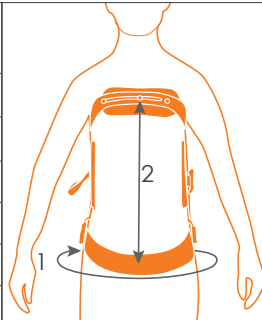Storlek	Höftmått i cm (1)	Höjd i cm (2)	Art.no	
1	50-75	41-54	50375-00-40	
1 Short		30-41	50375-50-40	
2	75-105	41-54	50375-00-50	
2 Short		30-41	50375-50-50	
3	105-135	41-54	50375-00-60	
3 Short		30-41	50375-50-60	